
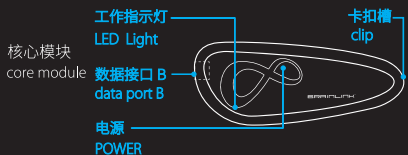


用户手册 User Guide

A 部件一览

Know Your BrainLink Lite

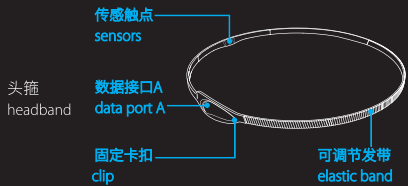

安装BrainLink Lite
Install your BrainLink Lite



将数据接口B对数据接口A后插入，并将固定卡扣卡入卡扣槽中。

Plug the data port B into data port A, and make sure the clips are locked.

B 应用安装

Install Apps

iOS

在iOS的App Store中搜索“BrainLink”并下载对应的应用。
Search **BrainLink** on App Store and download the Apps.

Android

在应用宝、豌豆荚、小米应用商城搜索“BrainLink”并下载应用。

Search **BrainLink** on Google Play, SnapPea, Application of treasure and download the Apps.

你也可以用微信扫描以下二维码，在页面中下载任意平台的对应应用。

If your device doesn't prompt you to download and install the app, go to <http://o.macrotellect.com/app> and you will be redirected to the Apple App Store or Google Play Store depending on your device.



C 将BrainLink Lite与移动设备连接

Connect BrainLink Lite With Your Mobile Device

长按(蜂鸣声后LED红蓝交替闪烁)
long press POWER (after a beep you can see LED Light flashing alternately between red and blue)



长按电源键开机
Long press POWER to switch on BrainLink Lite




在移动设备的蓝牙选项中搜索“BrainLink Lite”并完成配对。
Turn on Bluetooth on your mobile device to search BrainLink Lite and pair it.

iOS设备配对后可直接连接并在蓝牙设备列表中显示“已连接”，安卓设备配对后不会在设备列表中显示“已连接。”


When paired, on iOS device, you will see CONNECTED in MY DEVICES under Bluetooth page. On Android devices however, there will not be any connection information shown on the bluetooth list. The apps will anyway connect automatically.

D 佩戴头箍

Wear Headband

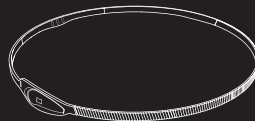

调整松紧扣位置，以适应自己的头围。
Put on BrainLink Lite and adjust the headband to your comfortable position.

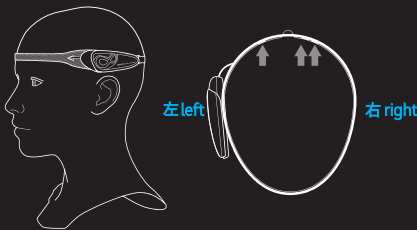


佩戴时请确保核心模块在头部左侧，并让传感触点紧贴前额皮肤。

Please make sure that the core module is on the left side of your head, and all 3 sensors are pressing against your forehead firmly.

E 关机 and 充电

Power Off And Charging

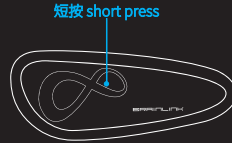

短按电源键即可关机
Short press POWER to switch off BrainLink Lite

USB充电线 USB Charging cable



当核心模块持续性的闪烁和发出蜂鸣时，表明它已进入低电量状态。

When the LED light flashes and beeps continuously, it means the battery of your BrainLink Lite is low.

充电 Charging



请使用包装内附带的USB充电线插入任意USB口中为核心模块充电。LED显示红色表明正在充电中，电池充满后LED会熄灭。
注意：请妥善保管附带的USB充电线，它是为BrainLink Lite特别定制的，无法用常见的USB充电线替代。

You can use the USB charging cable attached in the package to charge your BrainLink Lite to any USB port. The red LED light will be off when the charging process completes.
Note: Please keep the USB charging cable safely. It is a customized cable by Macrotellect and BrainLink Lite is not compatible to any other micro USB or mini USB cable.

BrainLink服务号
BrainLink Service Wechat



www.macrotellect.com

› 功能特点 Features

产品属性:便携脑电波传感器

Product Attributes: Brainwave sensing Headset

适配系统:iOS/Android

Compatibility: iOS/Android

› 基本参数 Technical Specifications

产品名称/产品品牌:BrainLink Lite

Product Name/Product Brand: BrainLink Lite

产品型号:BL002 V2.0

Product Model: BL002 V2.0

颜色:雅士黑/斜纹

Color: Elegant Black/Twill

长宽高比例(cm): L16 W16 H3

Size(cm): L16 W16 H3

产品净重(g):39

Net Weight(g): 39

产品材质:环保PU、合金金属、PMMA等

Material: PU/ Alloy metal/PMMA etc.

› 信号传输 Signal Transmission

传输方式:蓝牙

Transfer Method: Bluetooth

传输范围(m):不超过10m

Transmission Range(m): <10m

波特率:57600

Baud Rate: 57600

蓝牙兼容性:兼容蓝牙2.0, 蓝牙3.0, 蓝牙4.0移动设备

Bluetooth Compatibility:Bluetooth 2.0, Bluetooth3.0,

Bluetooth 4.0 mobile device

› 电池 Power

电池类别:可充电锂电池

Battery: Rechargeable Lithium battery

电池容量:180mAH

Battery Capacity: 180mAH

充电时间:45min

Charging Time: 45min

续航:180分钟, 续航时间会受实际使用情况而有浮动

Endurance: 180 min, depends on actual use

是否支持电源管理IC功能:支持

Power IC management support: YES

待机耗电功率:0.5mW

Standby Power Consumption: 0.5mW

› 指示灯 LED Light

指示灯颜色:红灯、蓝灯

LED Color: Red, Blue

红灯亮状态:正在充电

Red Light On: Charging

蓝灯亮状态:蓝牙已连接成功

Blue Light On: Bluetooth successfully connected

› 包装清单 Packing List

头箍x1

Headband*1

USB充电线 x1

USB charging cable *1

用户手册 x1

User Guide *1

保修卡x1

Warranty Card *1

便携袋x1

Carrying Bag*1

› 安规认证 Safety Certification

Bluetooth SIG

FCC/CE/SRRC/ROHS

UN38.3 Lithium Battery

Apple Made for iOS (MFi)

› 售后服务支持 Customer Service Support

全国联保电话:400 860 2689

Phone contact: 400 860 2689

客服邮箱:service@macrotellect.com

Email: service@macrotellect.com

制造商:深圳市宏智力科技有限公司

Manufacturer:Shenzhen Macrotellect Ltd.

地址:深圳市南山区高新技术产业园北松坪山路1号源兴科

技大厦南座1102

