




Part description



Accessories

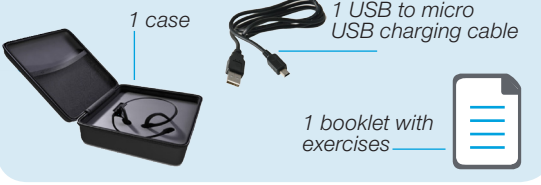

Features

- Bone conduction headphone
Very sensitive microphone
Dynamic filter to create a perceptive contrast

How to wear it

Place the wraparound head band behind your neck with the transducers resting on the bone in front of your ears...



How to charge

Connect FORBRAIN to a standard USB port on your PC or a wall charger via the USB charging cable.

LED Indication

Table with 2 columns: Color (Solid Blue, Blue light goes out, Solid Red, Red light goes out) and Status (Normal working mode, Battery too low, Headphone is being charged, Charging completed)

Troubleshooting

Troubleshooting table with columns: Issue (Does not turn on, Don't hear my voice, Have some feedback, Sound is too loud), Possible Problem, Resolution

Specifications

Specifications table: Speaker Type, Sensitivity, Microphone type, Sensitivity, Playback time, Charging time, Weight, Color, Carton size


Storage and maintenance

- Store the headset in cool and dry place. The working temperature should be 0-45°C...
After storage for a long period, please charge the headset before using again.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference...

Where is the serial code?

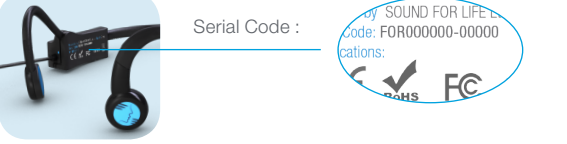

Precaution of use, limitations and disclaimer

You do not need to change the volume of FORBRAIN with few rare exceptions (very poor or hypersensitive hearing). Do not turn the volume of FORBRAIN up too high.

How to contact us?

SOUND FOR LIFE Ltd
Unit 1010, 10/F, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Note: If you need to return a product under warranty, please send a detailed explanation of the problem to: info@forbrain.com



Description de l'équipement



Accessoires



Composantes

- Casque de conduction osseuse
Microphone très sensible
Filtre dynamique pour créer une perception contrastée

Comment le porter

Positionnez le casque derrière la tête au-dessus de la nuque en posant les écouteurs sur l'os situé devant l'oreille...




Comment le recharger

Relez FORBRAIN à un port USB standard sur votre PC ou à un chargeur mural via le câble de recharge USB.

Voyant lumineux LED

Table with 2 columns: Couleur (Bleu solide, Lumière bleue s'éteint, Rouge solide, Lumière rouge s'éteint) and État (Mode de fonctionnement normal, Batterie trop faible, Casque en chargement, Chargement terminé)

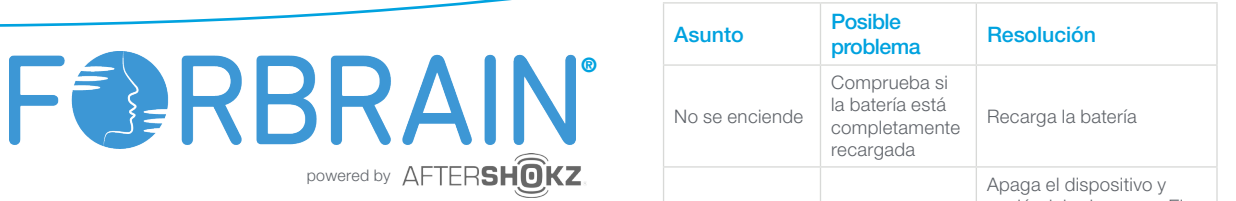

Descripción



Accesorios



Características

- Cascos de conducción ósea
Microfono muy sensible
Filtro dinámico para crear un contraste perceptivo

Cómo ponerse

Coloca la cinta para la cabeza detrás del cuello de modo que los transductores estén en contacto con los huesos temporales (situados delante de las orejas)...



Cómo recargar

Conecta el FORBRAIN a un puerto de USB estándar de tu PC o a un cargador mural via el cable de carga USB.

Indicación con LED


Table with 2 columns: Color (Luz azul permanente, La luz azul se apaga, Luz roja permanente, La luz roja se apaga) and Estado (Modo de funcionamiento normal, Batería demasiado baja, Los cascos se están recargando, Recarga completa)



Bestandteile



Zubehör

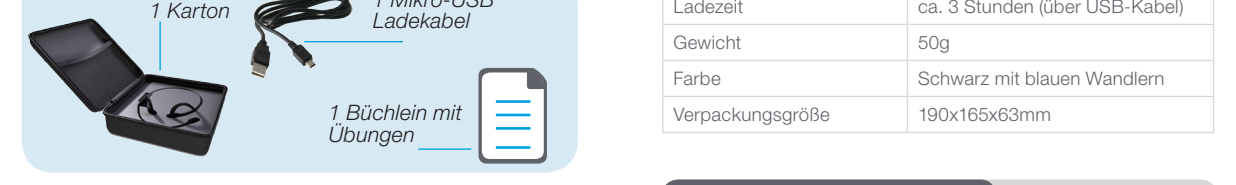

Merkmale

- Knochenleitungskopfhörer
Hochempfindliches Mikrophon
Dynamisches Filter zur Erzeugung des Wahrnehmungskontrastes

Hinweise zum Tragen

Platzieren Sie den Kopfhörerbügel so um Ihren Nacken, dass die Schallwandler auf dem Knochen vor Ihren Ohren zu liegen kommen...



Aufladen

Verbinden Sie FORBRAIN mithilfe des Ladekabels mit einem USB-Anschluss eines PCs oder mit einem USB-Ladegerät.

LED Anzeige

Table with 2 columns: LED Farbe (Ständig blau, Blau verflöschend und Abschaltung, Ständig rot, Rot verflöschend) and Status (Normalmodus, Ladung zu gering, Aufladend, Ladevorgang abgeschlossen)



Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung table with columns: Fehlerbild (Schaltet sich nicht an, Stimme nicht hörbar, Rückkoppelungen, Zu laut), Mögliches Problem, Lösung

Spezifikationen

Specifications table: Wandlertyp, Empfindlichkeit, Mikrofontyp, Sensibilität, Autonomie, Tiempo de recarga, Peso, Color, Tamaño de la caja

Lagerung und Wartung

- Lagern Sie das Headset an einem kühlen und trockenen Ort. Die Umgebungstemperatur im Betrieb sollte 0 - 45°C betragen.


Anmerkung:

Das Design und die Spezifikationen können sich jederzeit ohne Vorankündigung verändern.

FCC Warnung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Normen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

Wo ist die Seriennummer?

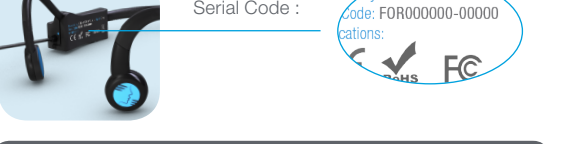

Vorsichtsmaßnahmen und Haftungsausschluss

Mit wenigen Ausnahmen (wenn Sie sehr schlecht hören oder hypersensibel sind) ist eine Veränderung der Normallautstärke nicht notwendig. Verwenden Sie FORBRAIN nie mit zu großer Lautstärke.

Kontakte

SOUND FOR LIFE Ltd
Unit 1010, 10/F, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Anmerkung: Falls Sie das Gerät aus Gewährleistungsgründen zurücksenden wollen, senden Sie bitte vorher detaillierte Informationen an: info@forbrain.com







Opis elementów urządzenia



Akcesoria



Opis urządzenia

- Słuchawki przewodnictwa kostnego
- Mikrofon o wysokiej czułości
- Filtr dynamiczny pozwalający uzyskać kontrast percepcyjny

Korzystanie ze słuchawek

Umieść opaskę z tyłu szyi, tak by przetworniki opierały się o kości nadprzeucio uszu, a nie na uszach. Ustaw mikrofon narpzecziwo ust, w odległości co najmniej 3 cm.



Ładowanie

Podłącz FORBRAIN do standardowego portu USB komputera lub do ładowarki sieciowej za pomocą kabla USB.

Wskaźnik diodowy

Table with 2 columns: Kolor (Intensywnie niebieski, Niebieska lampka gaśnie, Intensywnie czerwony, Czerwona lampka gaśnie) and Status (Normalny tryb pracy, Zbyt niski poziom naładowania, Ładowanie słuchawek, Ładowanie zakończone).

Rozwiązywanie problemów

Table with 3 columns: Problem, Prawdopodobna przyczyna, Rozwiązanie. Rows include issues like 'Urządzenie się nie włącza', 'Nie słyszę swojego głosu', 'Powstaje sprzężenie zwrotne', 'Dźwięk jest zbyt głośny'.

Charakterystyka techniczna

Table with 2 columns: Typ głośnika, Czulość, Typ mikrofonu, Czulość, Czas odtwarzania, Czas ładowania, Masa, Kolor, Wielkość opakowania.

Przechowywanie i konserwacja

- Słuchawki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Temperatura pracy urządzenia powinna wynosić od 0 do 45°C.


Informacja:

Projekt i specyfikacja techniczna urządzenia mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wzajemnie informacji o wyrobie można znaleźć na stronie internetowej www.forbrain.com

Wymogi Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15 wymogów Federalnej Komisji Łączności (FCC - Federal Communications Commission).

Gdzie jest numer seryjny?

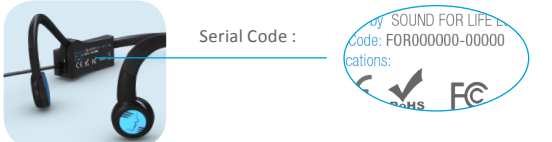

Środki ostrożności, ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności

Zmiana poziomu głośności urządzenia Forbrain nie jest konieczna, z wyjątkiem rzadkich sytuacji (bardzo zły słuch lub zbyt duża wrażliwość na dźwięki).

Kontakt

SOUND FOR LIFE Ltd
Unit 1010, 10/F, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Uwaga: W razie konieczności zwrotu wyrobu w ramach gwarancji prosimy o przesłanie szczegółowej informacji na adres: info@forbrain.com



제품 설명



부속품



제품 특징

- 골전도 헤드폰
- 초장각 마이크
- 지각 대비 장출을 위한 다이내믹 필터

마이크로 동시에 잡힌 음성은 지각대비를 유도하기 위한 다이내믹 필터 과정을 거쳐 골전도를 통해 양쪽의 측두골에 전달됩니다.

착용 방법

헤드 밴드와 골전도 변환기를 귀 위가 아닌 귀 앞 뼈에 기대어 목 뒤로 빙 돌려 배치하십시오! 마이크는 귀와의 입과 적어도 3 cm/ 1.2 인치의 거리를 유지해야 합니다.

충전 방법



LED 표시

Table with 2 columns: 색상 (파란색으로 고장된 경우, 밝은 색으로 고장된 경우, 붉은 빛이 꺼지는 경우) and 상태 (정상 작동 모드, 배터리가 매우 약한 상태, 헤드폰이 충전중임을 표시, 충전 완료).

고장 수리

Table with 3 columns: 문제, 가능한 문제, 해결 방법. Rows include issues like '커패시터가 없는 경우', '내 목소리가 들리지 않는 경우', '되먹임 소리 발생시', '소리가 지나치게 큰 경우'.

제품 사양

Table with 2 columns: 스피커 타입, 감도, 마이크 타입, 감도, 재생 시간, 충전 시간, 무게, 색상, 박스 크기.

보관 및 유지

- 헤드셋은 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 0~45°C (32~113°F) 사이에서 보관하십시오.


주의:

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품에 대한 자세한 정보를 원하시면 www.forbrain.com 을 방문하십시오.

FCC 주의 사항

이 장치는 FCC 규정 15 장을 준수합니다. 작동에는 다음의 두 가지 조건이 충족되어야 합니다: (1) 이 장치는 유해 간섭을 발생시키지 않으며...

일련 번호는 어디에 있습니까?

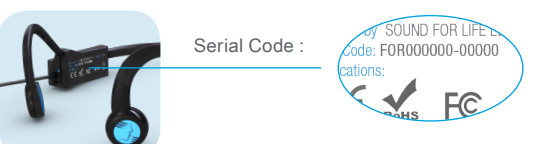

사용상 주의 사항, 책임의 한계 및 부인

매우 드문 예외(거의 들리지 않거나 청각이 지나치게 예민한 경우)를 제외하고 Forbrain의 볼륨을 변경할 필요가 없습니다. Forbrain의 볼륨을 지나치게 높이지 마십시오.

연락처

사운드 포 라이프 SOUND FOR LIFE Ltd
Unit 1010, 10/F, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

참고: 보증 조건에 따라 제품을 반환하는 경우 다음으로 자세한 정보를 보내주시기 바랍니다: info@forbrain.com



部品



アクセサリ



特徴

- 骨導振ヘッドホン
- 高感度マイクロホン
- 遠近感コントラストを生み出すダイナミック・フィルタ

マイクロホンが直接音声をキャッチします。ダイナミック・フィルタにより、遠近感のコントラストが生み出されます。

着用の仕方

ヘッドバンドを首の後ろに巻き付けます。その後、導振ヘッドホンが耳の正面に来るようにしてください。

FCC に関する注意事項

本機器はFCC規格15条に適合しています。操作に関しては以下2項目を条件としています: (1) 本機器は有害な干渉を生じません...

シリアルコードの場所



ご使用上の注意と免責事項

いくつかの例外(難聴である場合や、聴覚が非常に敏感である場合)を除いて、Forbrainのボリュームを変えする必要はありません。Forbrainのボリュームを上げ過ぎないでください。

LEDインジケーション

Table with 2 columns: 点灯色 (ブルー点灯, ブルー消灯, レッド点灯, レッド消灯) and 状態 (通常通りに機能, 充電が必要, ヘッドホン充電中, 充電完了).

注意: 保証のために製品を返却される場合は、詳細をご説明いただき、info@forbrain.com までお送りいただけますようお願いいたします。

トラブルシューティング

Table with 3 columns: トラブル, 考えられる原因, 解決法. Rows include issues like '電源が入らない', '自分の声が聞こえない', 'ハウリングが起きてしまう', '音声が大きすぎる'.

仕様

Table with 2 columns: スピーカ, 感度, マイクロホン, 感度, 再生時間, 充電時間, 重量, カラー, ボックスサイズ.

保管とお手入れ方法

- ヘッドセットは風通りがよく、乾燥した場所に保管してください。
- 長期間ご使用されなかった場合は、お使いになる前にヘッドセットを再び充電してください。

注意:

デザインおよび仕様は、予告なく変更される場合がございます。本製品に関する詳細については www.forbrain.com をご覧ください。

FCC に関する注意事項

本機器はFCC規格15条に適合しています。操作に関しては以下2項目を条件としています: (1) 本機器は有害な干渉を生じません...

シリアルコードの場所



ご使用上の注意と免責事項

いくつかの例外(難聴である場合や、聴覚が非常に敏感である場合)を除いて、Forbrainのボリュームを変えする必要はありません。Forbrainのボリュームを上げ過ぎないでください。

連絡先

SOUND FOR LIFE Ltd
Unit 1010, 10/F, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

注意: 保証のために製品を返却される場合は、詳細をご説明いただき、info@forbrain.com までお送りいただけますようお願いいたします。



部件说明



配件



产品特性

- 骨传导耳机
- 高度灵敏的麦克风
- 动态滤波器, 创造感知对比

在麦克风采集声音的同时, 动态滤波器会对声音进行处理, 引起感知对比, 与此同时, 声音也会通过骨传导传递到颞骨各面。

如何佩戴

将后挂环绕后脑勺, 让传感器留在耳部前方的耳骨上, 请勿放进耳朵里! 麦克风应置于嘴部前方至少3厘米/1.2英寸处。

如何充电

充电时, 使用USB充电电缆将耳机连接到个人电脑上的标准USB端口或墙式充电器。

LED 指示灯

Table with 2 columns: 颜色 (蓝色常亮, 蓝灯熄灭, 红色常亮, 红灯熄灭) and 状态 (正常工作模式, 电量过低, 耳机正在充电, 充电完成).

注意: 如果您有正当理由需要返回产品, 请将详细信息发送至: info@forbrain.com

故障排除

Table with 3 columns: 现象, 可能发生的问题, 解决方案. Rows include issues like '无法开机', '无法接收声音', '存在反馈噪音', '声音过大'.

规格参数

Table with 2 columns: 扬声器类型, 灵敏度, 麦克风类型, 灵敏度, 播放时间, 充电时间, 重量, 颜色, 外箱规格.

温馨提示

- 请将耳机存放在阴凉干燥的地方。
- 在工作温度应在0至45摄氏度(华氏32度至113度)之间。


注意:

如需了解产品详情, 敬请访问 www.forbrain.com

美国联邦通讯委员会 (FCC) 警告

该设备符合《美国联邦通讯委员会法规 (FCC Rules)》第15部分的规定。在使用设备时, 需要满足以下两个条件: (1) 该设备不会造成有害干扰...

序列号在哪里?

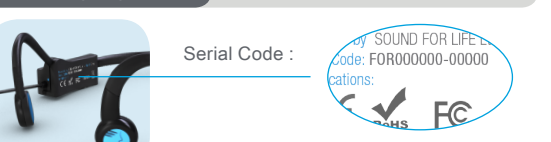

使用时的注意事项、限制和免责条款

除了极少数的特例 (听力非常差或者您对声音极度敏感) 之外, 否则, 您无需改变Forbrain的音量。Forbrain的音量上调过多, 您需要获得舒适的感受。

如何联系我们?

SOUND FOR LIFE Ltd
香港九龙尖沙咀
弥敦道132号
美丽华大厦10楼1010单元

注意: 如果您有正当理由需要返回产品, 请将详细信息发送至: info@forbrain.com

