



OMNIFITBRAIN

Benutzerhandbuch

- OCW-H20 -

OMNIC&S

Komponenten



Headset



Tragetasche



Zusätzliche
Ohrstöpsel



Micro-USB-Kabel




Benutzerhandbuch


- Die Zeichnungen im Benutzerhandbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen, und einige Komponentenlisten können ohne Benachrichtigung des Benutzers gemäß der Leistungsverbesserung und den Richtlinien des Herstellers geändert werden.
- Wenn grundlegende Komponenten fehlen, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.
- Wenn Sie zusätzliche Komponenten erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter +8270-7605-1177.

Name jedes Teils


Oben

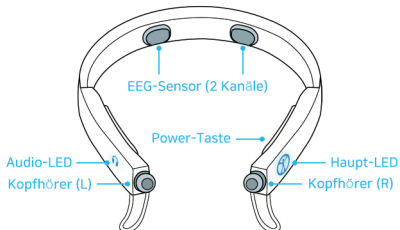

Unten

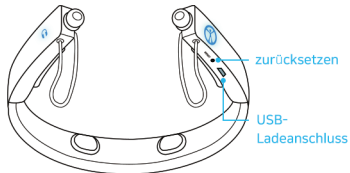

Aufladen

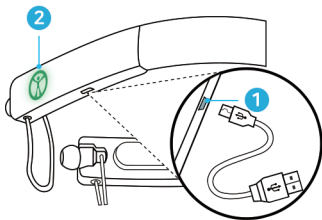

1. Verbinden Sie das 5-polige Ladekabel mit dem Ladeanschluss unten rechts am Headset.
2. Überprüfen Sie, ob die Haupt-LED-Benachrichtigung leuchtet

Status der Haupt-LED-Benachrichtigungslampe während des Ladevorgangs




Aufladen (ROT)



Aufladen abgeschlossen (Grün)

- Die Überprüfung des verbleibenden Akkuladestands ist in der Anwendung möglich.
- Achten Sie darauf, den Akku ausreichend aufzuladen, um ein unerwartetes Ausschalten während der Verwendung zu verhindern.

Wie zu tragen

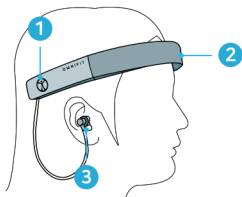

1. Platzieren Sie das Haupt-LED-Licht beim Tragen über dem rechten Ohr.
2. Beide von zwei EEG-Sensoren sollten auf die Stirn geklebt werden
3. Tragen Sie Kopfhörer in beiden Ohren.

* Bitte halten Sie Ihre Stirn und zwei EEG-Sensoren vor der Messung sauber von Schweiß und Make-up.

Installiere die App



Bitte laden Sie die OMNIFIT Brain-Anwendung (The Focus / The Rest) aus dem App Store herunter.




* Verfügbar nur auf Android 5.0 / iOS 10.0 oder höher OS und Bluetooth 4.2 (BLE) unterstützten Mobilgeräten (iOS 5s oder höher).

Führen Sie die App aus (empfohlen, in einer WLAN-Umgebung fortzufahren)

So koppeln Sie Ihr Headset

Stimsensorverbindung (Schritt 1) > Kopfhörerverbindung (Schritt 2)


1. Klicken Sie auf der Kopfhörerverbindungsseite der Anwendung auf „OK“.
2. Wählen Sie den gesuchten Gerätenamen (OCW-H20 ****) und stellen Sie eine Verbindung her
3. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Verbindungston.

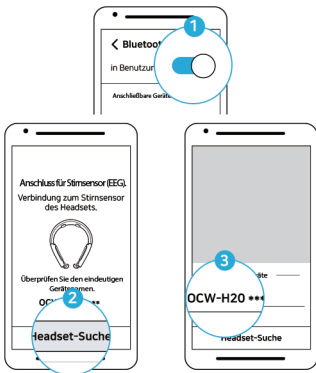

* Überprüfen Sie vor dem Anschließen die eindeutige Nummer, die auf der Unterseite des Geräts angezeigt wird.

Stirnsensorverbindung (Schritt 1) > **Kopfhörerverbindung (Schritt 2)**

1. Klicken Sie auf der Kopfhörerverbindungsseite der Anwendung auf „OK“.
2. Bluetooth „EIN“ in den mobilen Einstellungen

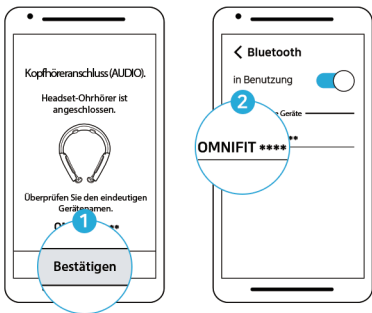

- * Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Verbindungston.
- * Wenn Sie das Headset mit einem anderen Mobilgerät verbinden möchten, Bitte versuchen Sie es nach der Abmeldung.


Anschluss und Verschleiß prüfen

Verbindungsstatus des Geräts

Überprüfen Sie den Verbindungsstatus über das Headset-Symbol in der Anwendung




Normale Verbindung

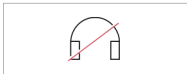


schlechte Verbindung

Verschleißzustand des Geräts

Überprüfen Sie den EEG-Benachrichtigungsinhalt und die EEG-Wellenform der Anwendung

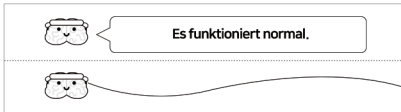



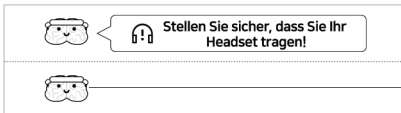


normaler Verschleiß



schlechter Verschleiß

Notiz

LED-Klassifizierung	Inhalt der LED-Anzeige	LED-Ausdruck	
		Beleuchtung (EIN)	Blinken (Blinken)
Main LED	Aufladen (ROT)		
	Aufladen abgeschlossen (GRÜN)		
	Eingeschaltet (Weiß)		
	Batterie schwach (Rot)		
	EEG-Bluetooth-Verbindung (Blau)		
Audio LED	Audio-Bluetooth-Verbindung (Blau)		

Produktspezifikationen und Eigenschaften

Artikel	Erläuterung
Modellname	OCW-H20
Name der Ausrüstung	Spezifisches drahtloses Gerät mit geringer Leistung (drahtloses Gerät für drahtloses Datenkommunikationssystem)
Bluetooth-Standard (EEG)	BLE v4.2
Bluetooth-Standard (Audio)	BT 4.0 (HSP, HFP, A2DP, AVRCP, PBAP, MAP, SPP profiles)
Batterie	3.7V / 300mAh, Li-Poly
Wartezeit	Bis zu 5 Tage
Messen/Musikspielzeit	Bis zu 8 Std
Ladezeit	weniger als 2 Stunden
Nenneingangsspannung	DC 4.75V ~ 5.3V, 400mA
Betriebstemperatur	5°C ~ 50°C
Maße/Gewicht	157.8 X 181 X 25.4mm / 97g
Frequenz	2402MHz ~ 2480MHz
Gegenseitig	OMNI C&S Co., Ltd.
Hersteller/Herstellungsland	Laxtha Co., Ltd. / Korea
Herstellungsjahr	am Produkt gesondert gekennzeichnet
Zertifizierungsnummer	R-CRS-OMF-OCW-H20

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung



Hörverlustprävention

- Wenn die Lautstärke des Headsets zu hoch ist, kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Niveau ein

- ▶ Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 50 °C oder unter 5 °C aus
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht von hohen Stellen fallen
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt mit brennbaren Materialien.
- ▶ Die Verwendung eines nicht standardmäßigen Ladegeräts kann zu Schäden am Produkt führen.
- ▶ Wenn Sie das Gerät willkürlich modifizieren, können Sie den Dienst nicht erhalten.
- ▶ Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke verwenden.

Produktgarantie

- Omni CNS garantiert Produkte wie folgt in Übereinstimmung mit den Standards für die Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten für jeden Artikel (angekündigt von der Fair Trade Commission).
- Wenn es ein Problem mit dem Produkt gibt, kontaktieren Sie bitte das Kundencenter unter 070-7605-1177.

Produktname : _____

Modellname : _____ Seriennummer : _____

Wo zu kaufen : _____ Kaufdatum : _____

Kundenname : _____ Kontakt : _____

※ Vorsichtsmaßnahmen für kostenlose und kostenpflichtige Reparaturen

Wenn es sich nicht um eine Fehlfunktion handelt, wird Ihnen eine Gebühr berechnet, wenn Sie einen Service anfordern, also lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung. Wenn das Handbuch das Problem nicht löst, empfehlen wir Ihnen, sich telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen.

Kostenloser Reparaturstandard

- Im Falle einer Leistungs- oder Funktionsstörung, die bei normalem Gebrauch innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist (ausgenommen Nichtversagen und Fahrlässigkeit)
- Wenn die gleichen Teile innerhalb von 12 Monaten im Laufe der normalen Verwendung des Produkts nach A/S

Arten von Verbraucherschäden		Vergütung		
		innerhalb der Garantiezeit	nach der Garantiezeit	
Leistungs- oder Funktionsausfall unter normalen Nutzungsbedingungen innerhalb der Garantiezeit	Wenn größere Reparaturen innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf erforderlich sind	Produktumtausch oder Rückerstattung	Unzutreffend	
	Wenn größere Reparaturen innerhalb eines Monats nach dem Kauf erforderlich sind	Produktumtausch oder kostenlose Reparatur		
	Wenn das Produkt nicht umgetauscht werden kann	Erstattung		
	Reparierbar	Wenn der Fehler aufgrund derselben Ursache bis zu 2 Mal auftritt	kostenlose Reparatur	kostenpflichtige Reparatur
		Falls der Fehler aufgrund derselben Ursache bis zu 3 Mal auftritt		
		Falls der Fehler aufgrund verschiedener Ursachen 5 Mal auftritt	Produkteustausch	Rückerstattung durch Aufschlag von 10 % auf den festen Abschreibungsbetrag
	Wenn eine Reparatur wegen Nichtaufbewahrung von Teilen innerhalb der Aufbewahrungsfrist nicht möglich ist			
	Wenn Ersatzteile verfügbar sind, aber nicht repariert werden können			

Bezahlte Reparaturstandards

- Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund von Fahrlässigkeit des Verbrauchers
 1. Im Falle einer Fehlfunktion durch Demontage, Umbau oder unsachgemäßen Gebrauch (Überschwemmung, Beschädigung, Beschädigung, äußere Einwirkung, Sturz) durch den Verbraucher
 2. Bei Fehlfunktionen aufgrund der Verwendung von Verbrauchsmaterialien und Zubehör, das nicht von uns angegeben ist
 3. Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund der Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung
- Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund einer Reparatur durch eine andere Person als unsere Techniker oder benannte Techniker
- Bei Ausfällen aufgrund von Naturkatastrophen (Blitz, Feuer, Erdbeben, Wind- und Überschwemmungsschäden, Tsunami etc.)
- Wenn ein Verbrauchsteil das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat (Akku usw.)

Kundendienstzentrum : 070-7605-1177

Wochentags 10:00 ~ 17:00 KST (Sa/So/Feiertage geschlossen)

www.omnicns.com

Informationen umtauschen und zurückgeben

- Wenn Sie vor der Lieferung einen Umtausch wünschen, müssen Sie dies dem Ort des Kaufs mitteilen, und er kann nicht willkürlich oder nach der Lieferung geändert werden.
- Bei Umtausch/Rückgabe aufgrund von Meinungsänderung gehen die Versandkosten zu Lasten des Kunden.
- Umtausch und Rückgabe sind innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware möglich. (Gesetz zum Verbraucherschutz im elektronischen Geschäftsverkehr)

[Kein Umtausch/Rückgabe]

- 1 Wenn das Produkt beschädigt ist oder das Produkt geöffnet und verwendet wurde
- 2 Falls die äußere Verpackung des Produkts beschädigt ist (außer wenn die Verpackung zur Produktidentifikation beschädigt ist) oder verloren geht
- 3 Wenn 7 Tage ab dem Datum der Bestellung vergangen sind
- 4 Wenn der Wert des Produkts durch Fahrlässigkeit des Kunden geschädigt oder beschädigt wird



OMNIFITBRAIN

Omni C&S Co., Ltd.

Digitaler 288 Grand Prix Post Tower, Guro-gu, Seoul, Erster Stock

www.omnicns.com